



Networked Health

Handleiding Catena - Glucose en Bloedruk




1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave.....	2
2. CVRM module toevoegen bij Diabetes patiënt	3
3. Patiënt toegang geven tot eigen dossier	4
4. Bloeddruk invoeren	7
5. Bericht versturen en ontvangen patiënt.....	10

2. CVRM module toevoegen bij Diabetes patiënt

Om een diabetes-patiënt op een eenvoudige manier een bloeddruk te laten invoeren in het Digitaal Logboek voegt u de CVRM behandeling toe aan de patiënt via onderstaande stappen (NB. Stap 3 waarbij u deelname ketenzorg op Nee zet is hierbij belangrijk).

- Open het Diabetes patiëntendossier
- Klik **Start nieuwe behandeling** in het desbetreffende patiëntendossier:

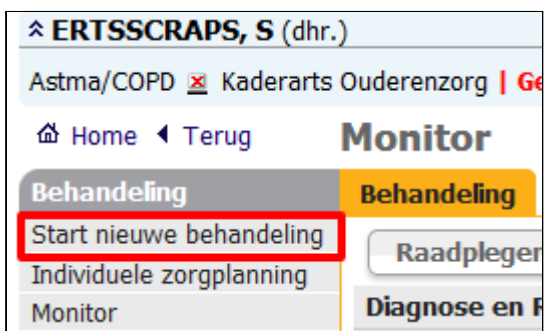

1. Voeg eventueel huisarts toe
2. Voeg hoofdbehandelaar toe
3. Zet deelname ketenzorg op Nee

- Kies OK en vervolgactie en klik op Enter

3. Patiënt toegang geven tot eigen dossier

Vervolgens geeft u de patiënt toegang tot het Digitaal Logboek.

❗ Zowel voor de diabetes behandeling als voor de CVRM behandeling dient u het Digitaal Logboek te activeren via onderstaande stappen. De gebruikersnaam en wachtwoord blijven hetzelfde voor de patiënt.

Stap 1:

Open het patiëntendossier en selecteer in het linkermenu de behandeling (dit dient u dus voor zowel diabetes als voor CVRM te doen).

1. Ga naar **Overzicht** in linkermenu
2. Ga naar **Wijzig toegangsgegevens**

✔ Als er nog geen e-mailadres is ingevuld dan kunt u het e-mailadres via **Wijzig aanmeldgegevens** toevoegen

Stap 2:

1. Vink **Actief** aan
2. Vul **gebruikersnaam** in. Wij adviseren het e-mailadres te gebruiken in kleine letters.
3. Vink **Mag onderzoek invoeren**.

Patiëntaccount

Onderstaande gegevens pas wijzigen, nadat u zich van de identiteit van de patiënt hebt vergewist.

1 Toegang Actief

Toegang geldig vanaf 01-04-2020

Toegang geldig tot

2 Gebruikersnaam flitser@gmail.com

E-mail flitser@gmail.com

Laatst ingelogd

Wachtwoord Reset *

Tweestaps-authenticatie Niet in gebruik

*) Een bericht met instructies wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Pazio DigiD Mag inloggen met Pazio DigiD

Digitaal logboek Diabetes

Toegang tot dossier Ja Nee

3 Mag onderzoek invoeren Ja Nee

- ✓ Als zowel voor de diabetes behandeling als voor de CVRM behandeling het Digitaal Logboek geactiveerd is kan een patiënt nu zijn glucosecurves invoeren, bloeddruk invoeren, lichaamsgewicht invoeren, bericht versturen en controles en uitslagen inzien.
- ✓ Als u in het Portavita systeem heeft aangegeven dat de patiënt insuline gebruikt dan krijgt de patiënt ook de mogelijkheid om insulinetoediening in te voeren

Stap 3:

Geef de gebruikersnaam door aan de patiënt.

Het wachtwoord kan de patiënt zelf instellen via de activatie link die per mail naar de patiënt verzonden is:

Aan flitser@gmail.com ☆

Geachte heer Flitser,

U heeft van uw zorgverlener Huisartsenpraktijk toegang gekregen tot het Digitaal Logboek.

Voor het aanmaken van een wachtwoord verzoeken wij u op onderstaande link te klikken:

[Activeer account](#)

LET OP: Uw gebruikersnaam wordt apart aan u verstrekt door uw zorgverlener Huisartsenpraktijk.

- ✓ U kunt ook een handleiding toesturen aan de patiënt. Per zorgpad kunt u de handleiding downloaden op de homepagina bij Documentatie → Instructies → Patiëntentoeegang - Patiëntenhandleiding Digitaal Logboek xxxxx.

4. Bloeddruk invoeren

Een diabetes-patiënt die ook toegang heeft tot de CVRM behandeling in het Digitaal Logboek (zie beschrijving CVRM module toevoegen en patiënt toegang geven in de voorgaande hoofdstukken) kan altijd zijn of haar bloeddruk invoeren via de link 'Zelfcontrole CVRM'.

The screenshot shows the 'Digitaal Logboek' interface for 'PORTAVITA'. The left sidebar contains a menu with the following items: Lettergrootte, Zorgplan, Zelfmanagement, Diabetesdagboek, Voornemens CVRM, Evaluaties CVRM, **Zelfcontrole CVRM** (highlighted with a red box), and Lichaamsgewicht. The main content area displays a notification: 'Deze applicatie bevat zeer vertrouwelijke informatie.' Below this, it shows the user's name 'Homepage van Demo - Portavita, H.' and a list of 'Berichten' (messages) with columns for 'Nieuwe berichten van', 'Onderwerp (lezen bericht)', and 'Datum (Tijd)'. There are no new messages. Below the messages, there is a section for 'Geplande controles' (planned checks) with a table:

Soort controle	Behandeling	Gepland door	Vanaf datum (uiterlijk op)
Consult	Diabetes	Portavita Podothérapie Oefenpraktijk	08-06-2015 (07-07-2015)
Zelfcontrole (Diabetes)	Diabetes	HMP Demo	06-07-2021 (04-08-2021)

Als een diabetes-patiënt geen toegang heeft tot de CVRM behandeling kan een patiënt ook zijn of haar bloeddruk invoeren via een zelfcontrole diabetes. Echter in tegenstelling tot de zelfcontrole CVRM moet de zelfcontrole diabetes wel elke keer door de huisartsenpraktijk worden ingepland. Daarnaast moet éénmalig een bloeddrukmeter bij de patiënt worden vastgelegd. Zie hiervoor de instructies op de volgende pagina.

Alternatieve methode: Bloeddruk invoeren via zelfcontrole diabetes

Uiteraard moet de patiënt toegang hebben gekregen tot zijn eigen diabetes dossier (zie hoofdstuk [patiënt toegang geven tot eigen dossier](#))

Activeren bloeddruk invoeren:

Stap 1 (alleen eerste keer): Voeg bloeddrukmeter toe

1. Ga naar **Behandelplan**
2. Ga naar tabblad **Hulpmiddelen**
3. Klik op **Wijzig**

FLITSER, DF (dhr.) Geboren 03-03-1933 (87j)

Diabetes | Portavita | Deelname ketenzorg Diabetes Ja | DM2 sinds 02-2018

Home | Terug **Behandelplan**

Patiënt | Behandelaars | Deelname ketenzorg | Controlebeleid | Persoonlijke streefwaard **Hulpmiddelen** | Behandelende organisaties

Dashboard | **Wijzig** | Medicatie | Werklijst | **Behandeling**

Astma/COPD > | CVRM > | Ouderenzorg > | **Diabetes** | Monitor

1 Behandelplan | Dagboek patient

Hulpmiddel	Type	Per	Datum laatst geijkt
Geen inzet van hulpmiddelen.			

4. Vink **Ja** aan
5. Vul in welk Merk/type bloeddrukmeter de patiënt heeft.
6. Vul in vanaf wanneer de patiënt de meter heeft.
7. Vul in wanneer de meter voor het laatst geijkt is.

Bloeddrukmeter

Patiënt gebruikt een bloeddrukmeter

4 Ja Nee

5 Merk / Type

6 Per (datum) **7** Datum laatst geijkt

Stap 2: Plan een zelfcontrole in

- Ga naar **Zelfcontrole** in linkermenu

- Klik op **Plannen**

1. Vul **datum** in

2. Vul in binnen welke termijn ten opzichte van de datum het onderzoek moet zijn uitgevoerd. Standaard staat deze op 30 dagen maar u kunt dit zelf aanpassen.

3. Geef aan of u een **notificatie** op uw **werklijst** wilt ontvangen zodra de patiënt het onderzoek heeft ingevoerd. U kunt hier ook aangeven dat een collega een seintje op zijn/haar werklijst moet krijgen in plaats van uzelf.

4. Akkoord staat aangevinkt, kies vervolgactie en Enter.

FLITSER, DF (dhr.)
Diabetes | Portavita | Deelname ketenzorg Diabetes Ja | DM2 sinds 02-2018

Home Terug **Plannen Zelfcontrole (Diabetes)**

1 Uitvoeren op datum
(het werkitem 'uitvoeren Zelfcontrole (Diabetes)' komt op de aangegeven dag op de werklijst)

2 Onderzoek afronden binnen dagen na gekozen uitvoerdatum
(onderzoeksresultaten moeten dan geaccordeerd in het systeem zijn ingevoerd)

3 Informeer zodra de resultaten zijn ingevoerd

Mij persoonlijk
 Mijn Collega
 Niemand

Tekenen voor akkoord Ik ga akkoord met deze planning

Vervolgactie OK, naar homepage OK, terug naar overzicht OK, naar patiëntmonitor

Resultaten: Via **Zelfcontrole** in het linkermenu. Als bij het plannen van de zelfcontrole is aangevinkt 'Informeert zodra de resultaten zijn ingevoerd' verschijnt er ook een werkitem 'Bekijk resultaten' op de werklijst van de betreffende werknemer.

5. Bericht versturen en ontvangen patiënt

In het Portavita Health Management Platform is het mogelijk om via een beveiligde manier berichten te sturen naar een patiënt.

Bericht sturen naar patiënt

- Open het patiëntendossier

1. Ga naar **Berichtenoverzicht**

2. Selecteer 'een bericht aan *patiëntnaam* opstellen'

^ FLITSER, DF (dhr.)
 Diabetes x Portavita | Deelname ketenzorg Diabetes Ja | DM2 sinds 02-2018 🌱
 Home ◀ Terug **Historisch overzicht berichten m.b.t. patiënt**

Patiënt **Overzicht**
 Dashboard
 Individuele zorgplanning
 Medicatie
 Werklijst
Behandeling
 Astma/COPD >
 CVRM >
 Ouderenzorg >
Diabetes
 Monitor
 Behandelplan
 Dagboek patiënt
 Onderzoeken
 Risico-inventarisatie
 Jaarcontrole
EPD Algemeen
 Overzicht
1 Berichtenoverzicht
 POH-5minuteninfo
 Importeren Labuitslagen
 HIS communicatie
 Journaal
 ...

▶ Een bericht aan **Zorggroep Attint** over "Flitser, DF" opstellen
 ▶ Een bericht aan een **andere organisatie** over "Flitser, DF" opstellen
2 ▶ Een bericht aan **Flitser, DF** opstellen

Alle berichten betreffende "Flitser, DF"
 Datum & tijd ▼ Afzender ◄ Geadre
 Er zijn geen berichten

- Vul vervolgens **Onderwerp** en **Bericht** in en klik op **Versturen**

Bericht ontvangen van een patiënt

Als een patiënt een antwoord stuurt of een nieuw bericht opstelt ziet u op de homepagina achter **mailbox** een **(1)** staan. Met het getal tussen haakjes wordt aangegeven hoeveel ongelezen berichten er in de mailbox zitten.



Open de mailbox en klik vervolgens op het **onderwerp** om het bericht te openen. Via de knop **Reageer** kunt u vervolgens een antwoord sturen.